



670/BR Extra

Chaise monte-escalier assistée avec accoudoirs



CARATTERISTICHE

[Visiter le site Extra 670/BR](#)

EXTRA est la chaise portoir Me.Ber. avec un dispositif à chenilles monte-escalier. Entièrement réalisée avec des alliages d' aluminium spéciaux aéronautiques. L' inclinaison du dossier, les poignées de préhension arrière et la configuration particulière des leviers avant assurent une répartition parfaite du poids, soulageant les efforts des opérateurs. De longs rails à haute adhérence permettent à la chaise d' être soutenue sur trois marches, offrant une sécurité et une maniabilité EXTRA extraordinaires pendant la descente avec le patient assis. Lors du transport sur terrain plat, les roues arrière de 200 mm et les roues avant de 125 mm assurent également un confort et une maniabilité élevés. L' équipement avec deux accoudoirs pratiques et une poignée arrière télescopique recouverte d' une gaine de protection maximise le confort et la maniabilité. Le repose-pieds pliant avec verrouillage magnétique et des solutions biomécaniques innovantes, par rapport aux chaises conventionnelles, complètent les caractéristiques de cet article de sauvetage. La version avec frein sur les roues arrière est également disponible, qui peut être achetée en option.

CONÇUE POUR UNE ÉVACUATION SÉCURISÉE EN PRÉSENCE D' ESCALIERS

Les principaux domaines d' utilisation d' une chaise monte-escalier sont généralement les services ordinaires ou secondaires, par exemple, les services de transport dans lesquels le patient est pris en charge, ou ramené à son domicile ou dans un établissement hospitalier, où il peut ne pas y avoir d' ascenseur. Extra est quelque chose de plus. En effet, elle a été pensée et conçue pour offrir un soutien maximal même lors des opérations d' évacuation rapide dans les services d' urgence. Elle se confirme donc comme un allié valable pour mieux faire face à tout type de situation, des opérations ordinaires à celles en conditions critiques.



Appareil certifié selon les normes harmonisées UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

CHAISE MONTE-ESCALIER Meber EXTRA- ESCALIER EN PIED D' OIE

CHAISE MONTE-ESCALIER MEBER EXTRA- ESCALIER EN COLIMAÇON

DONNÉES TECHNIQUES

Cardio	
Certification 10G	
Hauteur (cm)	101
Largeur (cm)	55
Longueur (cm)	81
Max length (cm)	139
Folded thickness (cm)	29
Poids (kg)	20,3
Capacité de charge (kg)	230
Material	Alliages d' aluminium

IMAGES



VOIR AUSSI



679
Zena

Chaise portoir étroite, 4 roues pliantes avec repose-pieds, accoudoirs et plateformes en aluminium.

ACCESSOIRES



670-001

Immobilisateur de tête en ruban orange/noir pour chaise monte-escalier Extra



960

« Extra fixing system » – système de fixation pour chaise Extra



670-002

Housse anti-poussière respirante en nylon noir pour chaises Extra



670-004

Support de roue de 200 mm de diamètre avec frein pour chaise Extra



612/AN-2/MEB

Ceinture thoracique orange/noire réglable avec attache à 4 points et ruban Meber pour brancards à chargement automatique et chaises



612/N-2/MEB

Ceinture thoracique noire réglable avec attache à 4 points et ruban Meber pour brancards à chargement automatique et chaises



566

Sac noir avec 3 ceintures à 2 pièces. Fond noir et Meber orange pour chaises Extra




12016-S

Tige porte-perfusion télescopique pliable avec bloc pour chaises Extra et Extra Ergolift



975

« Ergolift fixing system » – Système de fixation pour chaise Extra Ergolift

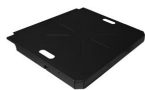

930L

Assise en aluminium peint noir gaufré pour chaises 670/BR et 671



056L

Dossier en aluminium peint noir gaufré pour chaises 670/BR et 671

BUNDLES



566

Sac noir avec 3 ceintures à 2 pièces. Fond noir et Meber orange pour chaises Extra